

ÄLCARE

取扱説明書

- この取扱説明書を熟読の上、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

CG PAD
CGパッド



圧迫用パッド
COMPRESSION PAD

はじめに…

“CGパッド”は、ウレタンフォームを使用した圧迫用パッドです。安全にお使いいただくため用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。尚、商品について不明な点は下記宛までご連絡ください。

●アルケア株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル 0120-770175

使用上のご注意

*“使用上のご注意”では、その危険度に応じて次の区分をしております。



警告

誤った取り扱いをすると、中等度以上の人身事故(*1)が想定される内容を示します。

- 本品は、ウレタンフォームを使用しています。ご使用にあたり、かゆみ、発赤等の症状を起こした場合には、速やかに使用を中止し、医師に相談するようご指導ください。
- 本品を直接創傷部、穿刺部に接触させないでください。
- 本品の使用により、疼痛、水泡形成、皮膚炎発現等の不具合が生じた場合は、速やかに使用を中止し医師に相談するようご指導ください。
- 本品は1回限りの使用を原則とし、再使用はしないでください。

注意

誤った取り扱いをすると、人が軽度の傷害(*2)を負ったり、物的損害(*3)の発生が想定される内容を示します。


- 均一な圧迫圧を得るため、台形状を崩さないようにご使用ください。

*1：中等度以上の人身事故とは、失明、けが、火傷（低温・高温）、感電、骨折、中毒等で、後遺症が残るもの、および治療に入院または長期の通院を要するものを示します。


*2：軽度の傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないもの（上記以外）を示します。

*3：物的損害とは、当該製品以外の家屋・家財（衣料品、寝具などを含む）および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。


各部の名称

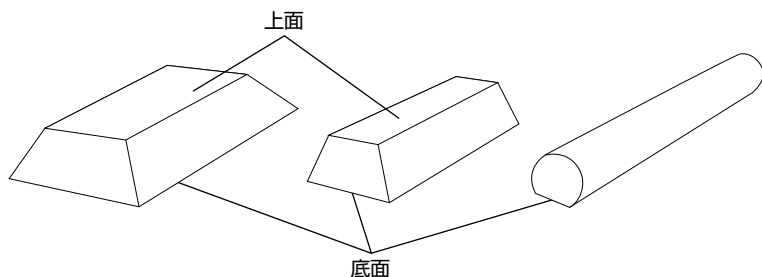

使用手順

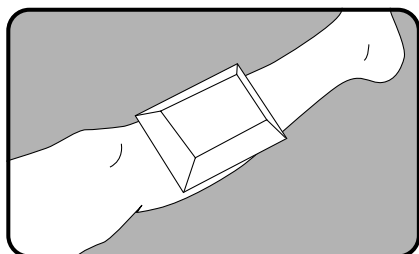


- ① 圧迫を加えたい部位に、基本的に本品の底面が肌側になるようにして置きます。

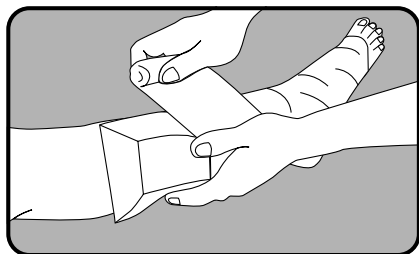


- ② 弾力包帯、弾力ストッキングなどで本品を固定します。

複数個数使用の場合

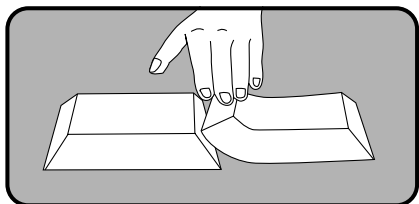


【1号】の場合
端を重ね合わせる

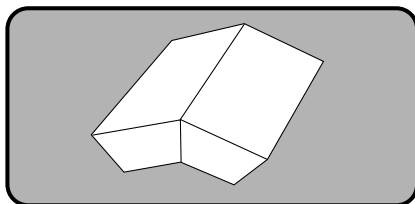


【2号】の場合
上面を肌側にして並べる


種類と規格

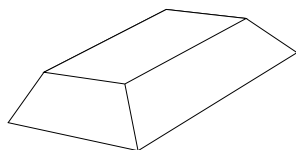

【1号】

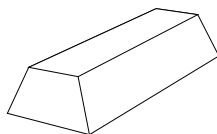

【2号】

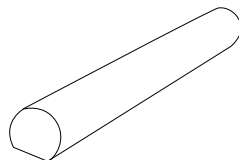

【3号】

種類	商品 コードNO.	規 格	1 函 入 数
1 号	16931	上面：100×60mm 底面：140×100mm 厚さ：25mm（台形状）	10コ
2 号	16932	上面：120×30mm 底面：140× 50mm 厚さ：25mm（台形状）	10コ
3 号	16933	太さ：28mmφ 長さ：300mm （底面カット 円筒状）	10コ

取り扱い上のご注意

- 高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。
- 保管状態によっては本体が変色することがありますが、使用上問題ありません。

アルケア株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
TEL.03-5611-7800（代表） FAX.03-5611-7825 <http://www.alcare.co.jp>

東京営業所 TEL.03-5638-8161 札幌営業所 TEL.011-261-1721 北陸営業所 TEL.076-243-5602 広島営業所 TEL.082-831-8777
首都圏東営業所 TEL.048-834-5614 仙台営業所 TEL.022-715-2733 大阪営業所 TEL.06-6337-2985 福岡営業所 TEL.092-441-8372
首都圏西営業所 TEL.045-472-7511 名古屋営業所 TEL.052-222-3860
INTERNATIONAL SALES DIVISION TEL.81-3-5611-7819

■アルケア医工学研究所 ■千葉工場 ■オストメイトサービスセンター